


錠剤・カプセルウエイトチェッカー

MODEL CIW 6.2

ドイツ Kraemer 社製のウエイトチェッカーは錠剤やカプセルを短時間かつ正確に測定し、良品と不良品を自動選別できる装置です。特殊な工具を使わず、素早く簡単に分解洗浄することができます。タッチパネルコントローラーにより個々のデータおよび統計データの表示及び出力が可能です。

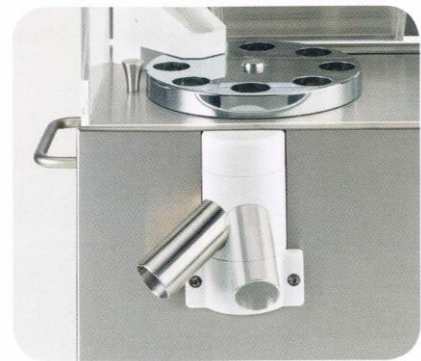

<自動選別装置>

特長

- ・ 研究用及び生産時サンプルチェック用ウエイトチェッカー
- ・ コントローラーからの簡単入力でその測定データが得られます
- ・ 色々な種類の錠剤、ハードカプセル、ソフトカプセルに使用できます
- ・ 良品域設定をすることで良品と不良品を選別排出装置で分けることができます
- ・ 単独での運転、又は他の打錠機等、外部装置との接続が可能
- ・ 測定値は画面に表示され、パソコンで全ての重量、統計データを保存できます
- ・ RS-232/RS-485 対応インターフェイス内蔵

販売代理店

 株式会社 **アキュレックス**

<http://www.acuraks.com> e-mail: info@acuraks.com

【本 社】

〒130-0011 東京都墨田区石原2丁目4番10号

本社・営業部 TEL 03 (6658) 8921 FAX 03 (6658) 8923

技 術 部 TEL 03 (6658) 8933 FAX 03 (6658) 8935

【大阪営業所】

〒573-0073 大阪府枚方市高田2-28-12

(株式会社クマエンジニアリング内)

TEL 072 (808) 8891 FAX 072 (852) 5850

仕様

- ・計量範囲：10mg ～ 50g
- ・繰返し精度：±2mg（標準状態） ±1mg（キャリブレーション）
- ・最小目盛：0.1mg
- ・計量速度：20～30個/分
- ・汎用インターフェイス：RS-232C/RS-422 各1個
- ・装置寸法：480mmW × 480mmD × 480mmH
- ・重量：30kg
- ・電源：100V、50/60Hz



オプション

- ・各種サンプルフィーダーおよびサンプルコレクター
- ・3方向、5方向振分装置
- ・自動サンプリング用エアコンベア
- ・FDA 21 CFR Part 11 対応ソフトウェア PH21
- ・移動用台車
- ・その他、各種オプション対応が可能



サンプルフィーダー

本機種以外に、錠剤厚さも同時に測定できるタイプとして
CIW6.3も揃えております。



サンプルコレクター



エアコンベア